


PHILIPS

sonicare

Advanced Clean



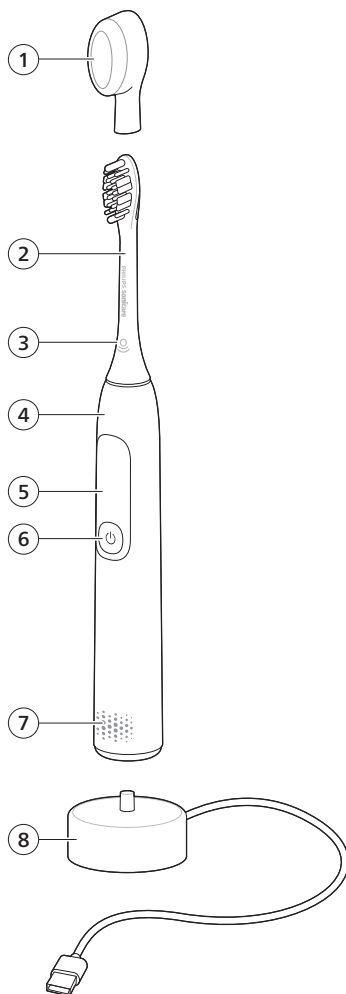

Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách **www.philips.com/welcome**.

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění.

Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.

Varování

- Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips. Pokud je součástí dodávky, použijte pouze originální kabel USB a napájecí zdroj USB.
- Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti. Pokud dojde k jeho poškození, přestaňte ho používat a obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi (viz „Záruka a podpora“).
- Pokud je kabel USB nebo napájecí zdroj USB poškozený, přestaňte ho používat.
- Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou.
- Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nepoužívejte adaptéry a nabíječky ve venkovním prostoru ani blízko horkých povrchů.
- Žádné díly výrobku nemyjte v myčce nádobí.
- Po čištění se ujistěte, že je nabíječka zcela suchá, než ji připojíte.

- Omyjte rukojeť s důrazem na oblast připojení hlavičky kartáčku. Okolí gumového těsnění jemně očistěte.
- Hlavici kartáčku měňte každé 3 měsíce nebo – pokud se objeví známky opotřebení – i častěji. Jsou-li vlákna na hlavici kartáčku poškozená nebo ohnutá, přestaňte hlavici používat.
- Tento přístroj je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka.
- Produkt nesmí přijít do přímého kontaktu s produkty, které obsahují esenciální oleje nebo kokosový olej. Kontakt může způsobit uvolnění vláken.
- Možno používat do nadmořské výšky 4 500 metrů.
- Údaje o látkách, na které se vztahuje nařízení REACH a které jsou obsažené ve výrobcích Philips, najdete na stránce www.philips.com/REACH

Zdravotní varování

- Tento spotřebič je zařízení pro osobní péči a není určen ke sdílení více uživateli.
- Přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým zubním lékařem / lékařem, pokud po použití dojde k nadměrnému nebo dlouho trvajícimu krvácení, nebo pokud zaznamenáte nepříjemné pocity nebo bolest během používání.
- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se s lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení, než přístroj použijete.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

- Tento přístroj obsahuje baterie, jejichž vyjmutí smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světu ani vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.

- Výrobek ani baterie neotevírejte, neupravujte, nepropichujte, nepoškozujte ani nerozebírejte ve snaze zabránit přehřívání baterií nebo uvolňování jedovatých či nebezpečných látek. Zabraňte zkratování, přebíjení nebo záměně pólů baterií.
- Přístroj obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně. Když je baterie na konci své životnosti, je nutné zařízení řádně zlikvidovat, viz část týkající se recyklace.
- Nabíjejte pouze pomocí adaptérů Philips WAA1001, WAA2001 s bezpečnostní certifikací IPX4 se jmenovitými vstupy (100-240 V~; 50/60 Hz; 3,5 W) a výstupními hodnotami (5 V DC; 2,5 W). Seznam adaptérů naleznete na stránce **www.philips.com/support**.
- Výrobek nabíjejte a používejte při teplotě mezi 0 °C a 40 °C.
- Spotřeba energie:
 - Režim vypnutí: Není k dispozici
 - Pohotovostní režim: < 0,1 W (automaticky dosaženo do 1 minuty)

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota –10 °C až 60 °C.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Philips tímto prohlašuje, že elektrické zubní kartáčky s typem rádiového zařízení (Bluetooth, NFC) vyhovují požadavkům evropské směrnice 2014/53/EU.

- Rádiové rozhraní bluetooth v příslušných výrobcích pracuje na frekvenci 2,4 GHz.
- Maximální výstupní výkon přenášený zařízením Bluetooth je 3 dBm.
- Rozhraní rádiové frekvence NFC v příslušných výrobcích pracuje na frekvenci 13,56 MHz.
- Maximální radiofrekvenční výkon přenášený zařízením je 30,16 dBm.

Plné znění prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie je k dispozici na následující webové adrese:

www.philips.com/support

Poznámka: Funkce se u různých modelů mohou lišit.

Některé modely nemusí být vybaveny technologií Bluetooth nebo NFC.


SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

Na výrobku se mohou objevit následující symboly:

Tento symbol znamená: Před použitím přístroje si přečtěte pokyny k použití.



Tento symbol znamená, že máte použít uvedený napájecí zdroj.

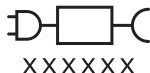

Zamýšlené použití

Tento elektrický zubní kartáček Sonicare je určen k odstraňování uchyceného plaku a zbytků potravy ze zubů. Snižuje tak riziko zubního kazu a zlepšuje a udržuje zdraví ústní dutiny. Tento elektrický zubní kartáček Sonicare je určen k domácímu použití. Děti by je měly používat pod dozorem dospělé osoby.

Váš kartáček Philips Sonicare (obr. 1)

- 1 Krytka hlavičky kartáčku
- 2 Inteligentní hlavičky kartáčku
- 3 symbol BrushSync
- 4 Rukojeť
- 5 Inteligentní displej
- 6 Tlačítko napájení/režimu
- 7 Indikátor senzoru tlaku

- 8 Nabíječka USB (adaptér do zásuvky není součástí balení)

Poznámka: Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Začínáme

Nasazení kartáčkové hlavice



- 1 Nasadte hlavu kartáčku tak, aby byla vlákna natočena stejným směrem jako přední strana rukojeti.



- 2 Hlavici kartáčku pevně zasuněte na kovovou hřídel, dokud se nezarazí.

Poznámka: Malá mezera patrná mezi hlavou kartáčku a rukojetí je normální. Umožňuje totiž správné vibrování kartáčkové hlavice.

Použití kartáčku Philips Sonicare

Pokud zubní kartáček Sonicare používáte poprvé, je normální, když cítíte více vibrací než při používání běžného zubního kartáčku. Je běžné, že při prvním použití budete na zubní kartáček příliš tlačít. Na zubní kartáček vyvíjejte pouze jemný tlak a nechte jej, aby zuby čistil za vás. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, postupujte podle níže uvedených pokynů pro čištění zubů.

Elektrický zubní kartáček Sonicare se dodává s aktivovanou funkcí EasyStart, která vám pomůže s přechodem na nový typ kartáčku. Tato funkce během prvních 14 cyklů čištění postupně zvyšuje sílu, abyste si na čištění se zubním kartáčkem Sonicare zvykli.

Pokyny k čištění zubů




- 1 Navlhčete vlákna a naneste na ně malé množství zubní pasty.




- 2 Zapněte kartáček Philips Sonicare stisknutím tlačítka vypínače. Poté vyberte režim čištění.

Poznámka: První 3 sekundy všech režimů začínají jemnými vibracemi. To zabraňuje rozstřikování zubní pasty a umožňuje vám procházet režimy a vybrat si preferovaný režim čištění.

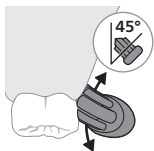


- 3 Přiložte vlákna zubního kartáčku k zubům pod mírným úhlem (45 stupňů) a jemně přitiskněte. Vlákna se díky tomu dostanou k okraji dásní nebo mírně pod okraj dásní.

Poznámka: Udržujte střed kartáčku ve stálém kontaktu se zuby.

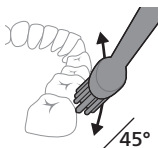


- 4 Držte kartáček tak, aby se štětiny jemně dotýkaly zubů a okrajů dásní. Čistěte si zuby krátkými pohyby sem a tam, aby se štětiny dostaly mezi zuby. Tento pohyb opakujte v průběhu celého cyklu čištění.

Poznámka: Vlákna by se měla jemně rozestupovat. Nedoporučuje se drhnout stejně, jako s manuálním zubním kartáčkem.

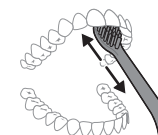


- 5 Chcete-li vyčistit vnitřní plochu předních zubů, nakloňte rukojeť kartáčku napůl svisle a na každém zubu proveďte několik svislých překrývajících se tahů kartáčkem.

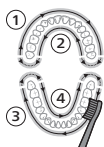

- 6 Začněte s čištěním v části 1 (horní zuby z vnějšku), čistěte po dobu 30 sekund a poté přejděte na část 2 (vnitřní strana horních zubů). Pokračujte s čištěním v části 3 (spodní zuby z vnějšku), čistěte po dobu 30 sekund a poté přejděte na část 4 (vnitřní strana spodních zubů).

Poznámka: Při používání režimů Deep Clean, Gum Pro nebo White je zapotřebí více času.

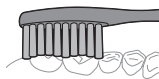

- 7 Po dokončení cyklu čištění můžete strávit chvíli čištěním žvýkacích ploch zubů a míst, kde se vyskytují skvrny. Můžete si vyčistit i jazyk, a to se zapnutým nebo vypnutým kartáčkem, podle toho, co vám vyhovuje.

Zubní kartáček Philips Sonicare by mělo být bezpečně používat na zubní rovnátka (hlavice kartáčku se při použití na rovnátka opotřebovává rychleji) a zubní náhrady (výplně, korunky, fazety), pokud jsou řádně připevněny a nejsou poškozeny. Pokud se objeví nějaký problém, obraťte se na odborníka ve stomatologii.

Poznámka: Pokud se zubní kartáček Philips Sonicare používá v klinických studiích, musí být v režimu Clean s plně nabitou rukojetí a funkce EasyStart musí být deaktivována.

Režimy

Elektrický zubní kartáček je vybaven pěti různými režimy: Clean, Deep Clean, Gum Pro, Sensitive a White. Optimální režim vybere technologie BrushSync automaticky v závislosti na typu nasazené inteligentní hlavice kartáčku.

Chcete-li režim manuálně změnit, stiskněte vypínač, když je zubní kartáček zapnutý. Všechny hlavice kartáčku Philips Sonicare fungují v každém z režimů.



Režim	Clean	Deep Clean	Gum Pro	Sensitive (Citlivé zuby)	White
Obraz režimu	 Clean	 Deep Clean	 Gum Pro	 Sensitive	 White
Výhoda	Odstranění plaku	Vynikající odstranění plaku	Odstranění plaku a masáž dásní	Zvláště jemný režim pro citlivé zuby a dásně.	Odstranění plaku a povrchových skvrn
Celková doba čištění	2 minuty	3 minuty	3 minuty	2 minuty	2 minuty a 30 sekund
Jak čistit	Každý úsek čistěte 30 sekund. 	Každý úsek čistěte 45 sekund. 	Každý úsek čistěte 30 sekund.,  Poté čistěte podél linie dásní každou část po dobu 15 sekund.	Každý úsek čistěte 30 sekund. 	Každý úsek čistěte 30 sekund.,  Poté čistěte horní a dolní přední zuby po dobu 15 sekund.

Technologie BrushSync



Technologie BrushSync umožňuje hlavici kartáčku komunikovat s rukojetí prostřednictvím mikročipu. Symbol  ve spodní části hlavičky kartáčku označuje, že tato hlavička kartáčku touto technologií disponuje.

Co technologie BrushSync umožňuje:

- Indikátor pro připomenutí výměny hlavičky kartáčku
- Párování režimu hlavičky kartáčku

Philips Sonicare nabízí širokou škálu inteligentních hlavic kartáčku vybavených technologií BrushSync. Pokud si chcete prohlédnout celou řadu našich hlavic zubních kartáčků a najít tu, která pro vás bude nejlepší, navštivte stránky www.philips.com/toothbrush-heads, kde najdete další informace.

Funkce

- Senzor tlaku
- SmarTimer
- Přehledy o čištění
- QuadPacer
- EasyStart
- Indikátor pro připomenutí výměny hlavičky kartáčku
- Párování režimu hlavičky kartáčku

Senzor tlaku



Kartáček Philips Sonicare je vybaven vyspělým senzorem, který měří tlak vyvíjený při čištění zubů. Pokud použijete příliš velký tlak, zubní kartáček vám okamžitě poskytne zpětnou vazbu, že je potřeba tlak upravit. Když během čištění vyvinete příliš velký tlak, pocítíte změnu vibrací a spodní část rukojeti se rozsvítí oranžově.

Přehledy o čištění

Zubní kartáček Philips Sonicare pravidelně poskytuje přehled o vašem chování při čištění zubů.



Po čištění se na displeji zobrazí přehled o době čištění.

- Doba čištění 2 minuty nebo více
- Doba čištění kratší než 2 minuty
- Během čištění se na displeji zobrazuje aktuální režim čištění a doba čištění.


SmartTimer

Funkce SmartTimer signalizuje dokončení cyklu čištění tím, že na konci cyklu čištění zubní kartáček automaticky vypne.

Zubní specialisté doporučují čistit zuby dvakrát denně po dobu nejméně 2 minut.

Poznámka: Pokud po spuštění cyklu čištění stisknete vypínač, zubní kartáček se pozastaví. Po 15sekundové pauze se funkce SmartTimer resetuje.

QuadPacer

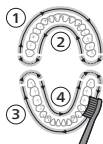

Funkce QuadPacer je intervalový časovač, který vás pomocí krátkého pípnutí a pozastavení upozorní na rovnoměrné a důkladné vyčištění všech 4 částí ústní dutiny. Tento model kartáčku Philips Sonicare se dodává s aktivovanou funkcí QuadPacer.

Poznámka: Při používání režimů Deep Clean, Gum Pro nebo White je zapotřebí více času.

EasyStart

Model kartáčku Philips Sonicare se dodává s aktivovanou funkcí EasyStart. Funkce EasyStart jemně zvyšuje sílu prvních 14 čištění, abyste si zvykli na čištění s kartáčkem Philips Sonicare.

Pokud se zubní kartáček Philips Sonicare používá v klinických studiích, musí se používat při vysoké intenzitě s plně nabitou rukojetí a deaktivovanou funkcí EasyStart.

Pro deaktivaci funkce EasyStart (viz „Aktivace nebo deaktivace funkcí“).

Připomenutí výměny hlavičky kartáčku

Kartáček Philips Sonicare je vybaven technologií BrushSync, která sleduje opotřebení kartáčkové hlavičky. Tato funkce vám dá záruku nejlepšího čištění a péče o zuby.

Poznámka: Tato funkce funguje pouze s inteligentními kartáčkovými hlavicemi Philips Sonicare s technologií BrushSync.



- 1 Když je nová inteligentní hlavička kartáčku poprvé připevněna, rukojeť rozpozná, že máte hlavičku kartáčku Philips s technologií BrushSync, a na displeji se zobrazí symbol hlavičky kartáčku.
- 2 V průběhu času, na základě tlaku, který vyvíjíte, a toho, jak dlouho byla hlavička kartáčku používána, bude rukojeť sledovat opotřebení hlavičky kartáčku, aby bylo možné určit optimální čas na výměnu kartáčku. Když skončí životnost hlavičky kartáčku, na displeji se zobrazí symbol připomenutí výměny hlavičky kartáčku a upozornění, že byste měli hlavičku kartáčku vyměnit co nejdříve.

Poznámka: Hlavičky kartáčku Philips Sonicare vyměňujte každé 3 měsíce. Tak dosáhnete optimálních výsledků. Používejte pouze náhradní hlavičky kartáček Philips Sonicare.

Párování režimu hlavice kartáčku

Hlavice kartáčku s technologií BrushSync jsou vybaveny mikročipem, který komunikuje s rukojetí a automaticky ji spáruje s doporučeným režimem a intenzitou. Většina hlavíc kartáčku s technologií BrushSync se automaticky spáruje do režimu Clean. Hlavice kartáčku s konkrétními výhodami se párují do odpovídajícího režimu (pokud je k dispozici). Například:

G3 Premium Gum Care : Režim Gum Pro


S2 Sensitive: Režim Sensitive

W Optimal White: Režim White

Poznámka: Pokud oproti doporučenému nastavení režim změníte, bude si hlavice kartáčku zvolené nastavení pamatovat pro budoucí cykly čištění.

Nabíjení a stav baterie

Nabíjení kartáčku Philips Sonicare

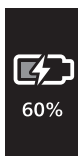

- 1 Připojte nabíječku s USB k adaptéru do zásuvky a ten zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Umístěte rukojeť na zapojenou nabíječku.
 - Na displeji se zobrazí ikona baterie se symbolem blesku a uslyšíte dvě pípnutí. Indikátor senzoru tlaku se také na 5 sekund rozsvítí bíle.

Poznámka: Úplné nabití baterie může trvat až 16 hodin, avšak zubní kartáček Philips Sonicare můžete použít ještě předtím, než se plně nabije.

Poznámka: Tento model zubního kartáčku Philips Sonicare umožňuje minimálně 28 cyklů čištění, přičemž každé čištění trvá 2 minuty (14 dní, pokud se používá dvakrát denně).

Stav baterie

Na LCD displeji se zobrazí stav baterie po každém čištění, při umístění rukojeti do nabíječky a při jejím vyjmutí z nabíječky. Během nabíjení zkontrolujte stav baterie stisknutím tlačítka vypínače.

Ikona baterie mění barvu podle různých úrovní nabití baterie: změní se na žlutou, pokud je úroveň nabití

baterie nižší než 40 %; vybitá baterie je indikována blikáním červené ikony se dvěma krátkými pípnutími.

Stav baterie	Barva ikony baterie	Procento baterie
Málo nabitá	Červená	0% - 20%
Středně nabitá	Žlutá	21% - 40%
Nabitá	Modrá	41% - 100%

Aktivace nebo deaktivace funkcí

Následující funkce zubního kartáčku můžete aktivovat nebo deaktivovat:

- EasyStart
- Připomenutí výměny hlavice kartáčku

Chcete-li tyto funkce aktivovat nebo deaktivovat, postupujte podle následujících pokynů:

EasyStart



- 1 Umístěte rukojeť na zapojenou nabíječku.
 - 2 Držte vypínač stisknutý, dokud neuslyšíte jedno krátké pípnutí (po 3 sekundách).
 - 3 Uvolněte vypínač.
- Trojitý vzrůstající tón znamená, že funkce EasyStart byla aktivována. Ikona na displeji ukazuje, že program EasyStart byl aktivován.
 - Trojitý klesající tón znamená, že funkce EasyStart byla deaktivována. Ikona na displeji ukazuje, že program EasyStart byl deaktivován.

Poznámka: Pro dosažení klinické účinnosti musí být funkce EasyStart deaktivována.

Připomenutí výměny hlavice kartáčku

Poznámka: Připomenutí výměny kartáčkové hlavice můžete aktivovat nebo deaktivovat pouze v případě, že je na rukojeti inteligentní kartáčková hlavice.




- 1 Umístěte rukojeť na zapojenou nabíječku.
- 2 Ponechte rukojeť na nabíječce a stiskněte a podržte tlačítko vypínače.
- 3 Držte vypínač stisknutý, dokud neuslyšíte dvě krátká pípnutí (po 6 sekundách).
- 4 Uvolněte vypínač.
 - Trojitý vzrůstající tón znamená, že funkce připomenutí výměny kartáčkové hlavice byla aktivována. Ikona na displeji ukazuje, že připomenutí výměny hlavice kartáčku bylo aktivováno.
 - Trojitý klesající tón znamená, že funkce připomenutí výměny kartáčkové hlavice byla deaktivována. Ikona na displeji ukazuje, že připomenutí výměny hlavice kartáčku bylo deaktivováno.

Čištění

Váš zubní kartáček Philips Sonicare je vhodné pravidelně čistit a odstraňovat z něj zbytky zubní pasty a jiných nečistot. Pokud kartáček Philips Sonicare čistit nebudete, může se zhoršit hygiena nástroje a může dojít i k jeho poškození.

Varování: Nečistěte výrobek ani příslušenství ostrými předměty, v myčce na nádobí, v mikrovlnné troubě, chemikáliemi ani ve vroucí vodě.

Rukojeť zubního kartáčku

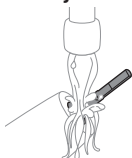

- 1 Sundejte kartáčkovou hlavici a kovovou hřídel opláchněte teplou vodou. Alespoň jednou týdně, nejlépe však po každém použití, důsledně odstraňte zbytky zubní pasty z rukojeti a okolí tlačítek.


Upozornění: Na gumové těsnění na kovové hřídeli ani na plochu kolem tlačítek netlačte ostrými předměty. Mohli byste ho poškodit.

- 2 Utřete celý povrch rukojeti vlhkým hadříkem.

Upozornění: Nekomlejte rukojeť o umyvadlo nebo o kuchyňskou desku, abyste odstranili přebytečnou vodu.

- 3 Usušte rukojeť měkkým hadříkem nebo ručníkem.

Hlavice kartáčku

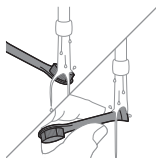

- 1 Hlavici kartáčku a vlákna opláchněte po každém použití a nechte je uschnout na vzduchu.
- 2 Alespoň jednou za týden vyjměte hlavici kartáčku z rukojeti a opláchněte konektor hlavice kartáčku teplou vodou.

Nabíječka

- 1 Před čištěním nabíječku odpojte ze sítě.
- 2 Utřete celý povrch nabíječky vlhkým hadříkem.

Skladování

Pokud nebudete produkt delší dobu používat, odpojte jej ze sítě a vyčistěte jej (viz kapitola „Čištění“). Skladujte ho na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření.

Zubní kartáček pravidelně nabíjejte, abyste zabránili úplnému vybití baterie. Úplně vybitá baterie se nemusí znovu nabít.

Umístění čísla modelu

Číslo modelu (HX379x) zubního kartáčku Philips Sonicare najdete ve spodní části jeho rukojeti.

Řešení problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web **www.philips.com/support** a zadejte číslo modelu, čímž se dostanete k seznamu odpovědí na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Hlavici kartáčku se mi nedaří plně připojit. Mezi hlavicí kartáčku a rukojetí je mezera.		Tato mezera je normální a je nezbytná k tomu, aby hlavice kartáčku správně vibrovala. Hlavice kartáčku musí být schopna pohybu, aby vytvářela správné vibrace.
Zubní kartáček Philips Sonicare vibruje s menší intenzitou než dříve.	Hlavice kartáčku je příliš blízko těla zubního kartáčku nebo je třeba kartáček nabít.	Sejměte hlavici kartáčku z rukojeti a znovu ji nasadte na kovovou hřídel tak, že ponecháte malou mezeru (1–2 mm). Při nabíjení se před umístěním zubního kartáčku na nabíječku ujistěte, že je nabíječka zapojena do napájecího zdroje a umístěna na rovném povrchu. Nechte zubní kartáček nabíjet po dobu 24 hodin.
Zubní kartáček je nabitý, ale funguje jen krátce.	Základna zubního kartáčku není při pokusu o nabíjení položena naplocho na nabíječku.	Před umístěním zubního kartáčku na nabíječku se ujistěte, že je nabíječka zapojena do napájecího zdroje a umístěna na rovném povrchu. Nechte zubní kartáček nabíjet po dobu 24 hodin.

Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web **www.philips.com/support** nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

Omezení záruky

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

- hlavy kartáčků,
- poškození způsobené neoprávněnou výměnou součástí,
- poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, nedostatečná péče, úpravy nebo neoprávněné opravy,
- běžné opotřebení, například odštípnutí, škrábance, oděrky, odbarvení nebo vyblednutí.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

OBSAHUJE LITHIUM-IONTOVÝ DOBÍJECÍ ČLÁNEK. MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA.

Vestavěnou dobíjecí baterii musí v případě likvidace výrobku vyjmout kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá.

Při manipulaci s náradím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.


Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.

Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.


Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovoďte, aby se póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá. K vyjmutí nabíjecí baterie potřebujete plochý (standardní) šroubovák.-


- 1 Chcete-li dobíjecí baterii zcela vybit, vyjměte rukojeť z nabíječky, zapněte kartáček Philips Sonicare a nechte jej pracovat, dokud se nezastaví. Tento krok opakujte, dokud již není možné kartáček Philips Sonicare zapnout.
- 2 Odstraňte fólii ve spodní části rukojeti a poté povolte šroub.

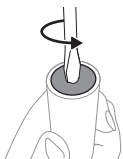


- 3 Sejměte koncový kryt z rukojeti zubního kartáčku.

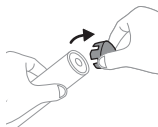


- 4 Držte rukojeť dnem vzhůru a zatlačte hřídel proti tvrdému povrchu.

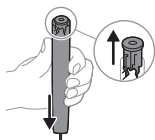


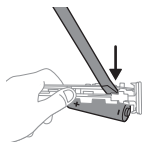

- 5 Vklíňte šroubovák mezi baterii a bílý kryt na spodní straně vnitřních součástí. Poté páčením šroubováku od baterie zlomte spodní část bílého rámu.

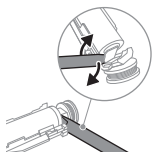

- 6 Vložením šroubováku mezi spodní část baterie a bílý rám dojde ke zlomení kovového jazýčku, pomocí kterého je baterie připojená k zelené desce s plošnými spoji. Tím dojde k uvolnění spodního konce baterie z rámu.

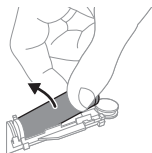

- 7 Uchopte baterii a vytáhněte ji z vnitřních součástí. Zlomíte tak druhý kovový jazýček baterie.

Upozornění: Dávejte pozor na ostré hrany jazýčků baterie, aby nedošlo k poranění prstů.



- 8 Zalepte kontakty baterie páskou, čímž zabráníte vzniku elektrického výboje ze zbytkového nabití baterie. Dobíjecí baterii nyní lze recyklovat a zbytek výrobku náležitě zlikvidovat.

EAC UK
CA

www.philips.com/Sonicare
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

©2025 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.
300014966451 (21/07/2025)

