



xiaomi



Mi Body Composition Scale 2

Uživatelský manuál

Spárování a první spuštění


Vložení baterií

Mi Body Composition Scale 2 je napájena 4 bateriemi typu AAA. Před prvním použitím vložte prosím baterie do váhy podle nákresu.

Spárování s mobilním telefonem

Toto zařízení komunikuje s telefonem skrze bezdrátovou technologii Bluetooth. Pro správný chod aplikace budete potřebovat mobilní telefon s iOS nebo Androidem 4.3+. Postup pro připojení k zařízení je následující:

1. Stáhněte z Obchodu Play či Apple AppStore oficiální aplikaci Mi Fit.
2. Spusťte aplikaci a přihlaste se nebo vytvořte nový Xiaomi účet (je nezbytný k funkci aplikace Mi Fit).
3. Po úspěšném přihlášení se přepněte do záložky Profil a vyberte možnost Přidat nové zařízení.
4. Zvolte chytrou váhu a postupujte podle instrukcí aplikace.
5. Položte váhu na podlahu a stoupněte si na ni. Dojde k párování. Stůjte na ní, dokud nedojde k úspěšnému dokončení párování. Pokud by proces trval dlouho, zrušte párování, stoupněte si pryč z váhy a proces opakujte.

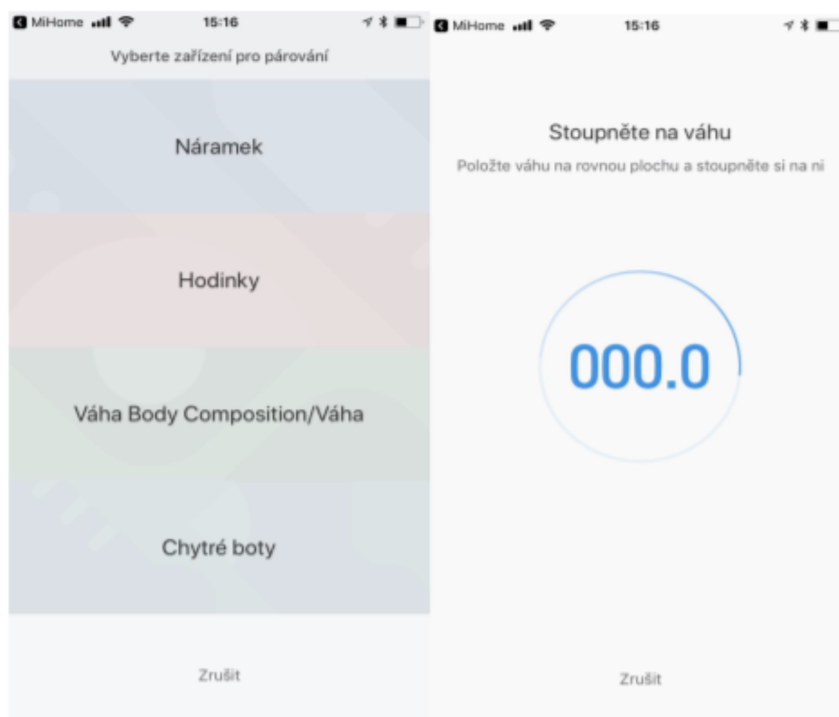


Používání chytré váhy

Používání bez aplikace

Mi Body Composition Scale 2 lze používat i bez mobilního telefonu a aplikace. Postačí si na váhu stoupnout a displej zobrazí Vaši hmotnost. Na displeji váhy se však nezobrazí jiné naměřené hodnoty (poměr tuku, svalů, vody apod.).

Používání s aplikací

Pro maximální využití chytré váhy je doporučeno použít při vážení aplikaci Mi Fit. Stačí spustit aplikaci v mobilním telefonu a stoupnout si na váhu. Mi Fit automaticky rozpozná nové vážení a začne Vás o průběhu informovat na displeji. Po úspěšném zvážení zobrazí i další údaje a statistiky.

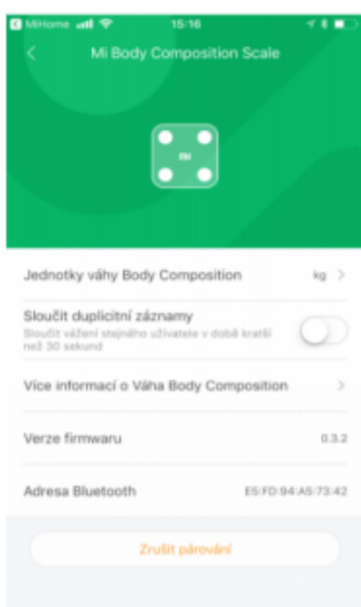

Změna jednotek

Přejděte do sekce Profil - Váha Mi Body ... - Jednotky váhy a nastavte požadované jednotky.

Chybové hlášky na displeji váhy

"OL" - tento symbol se objeví na váze v případě, že je překročena maximální hmotnost 150 kg.

"L" - tento symbol se objeví v momentě, kdy docházejí baterie. Vyměňte prosím AAA baterie za nové.

Prohlašujeme, že zařízení splňuje veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství: ES 1999/5/ES – NV č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění NV č. 483/2002 Sb. a NV č. 251/2003 Sb. a příslušným předpisům a normám, které z nařízení (směrnic) vyplývají. EU Prohlášení o shodě lze najít na www.beryko.cz/manuály.

Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

Dovozce: Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76 301 00 Plzeň www.beryko.cz

